

Instrução de Uso

Versão: C/2
Data: 2021.5.7



Representante autorizado da Europa

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adicionar: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo , Alemanha
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726
dimdi Não.: DE/0000040627 E-mail: shholding@hotmail.com



Alton (Xangai) Medical Instruments Co., Ltd.
Endereço: Edifício No.24, JinShao Rd. 1688, Baoshan District,
200949 Xangai, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA.
Tel: +86 21 5677 8511
Fax: +86 21 6630 7823

Querido cliente:

Agradecemos por usar nossos produtos. Por favor leia o manual com cuidado antes de usar nossos produtos para que você possa utilizar e manter os produtos com precisão.

1. Uso pretendido

Os coletores de pólipos são usadas para coletar e separar pólipos. Apenas para uso único.

2. Projeto

A Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd. fornece coletores para pólipos em um tamanho padrão aplicável à maioria dos endoscópios.

3. Antes usar

O usuário deve estudar estas instruções cuidadosamente antes de usar os coletores de pólipos.

Além disso, o usuário deve inspecionar o instrumento quanto a defeitos e danos, após retirá-lo da embalagem. Se forem detectados danos ou defeitos nesta inspeção, o instrumento não deve ser utilizado sobre o endoscópio e deve imediatamente ser devolvido para **Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd.** para inspeção por um especialista.

Os coletores de pólipos são fornecidos não estéreis pela Alton na entrega. A armadilha de pólipos deve ser inspecionada quanto a danos antes do uso. Apenas o dispositivo não danificado deve ser usado! O instrumento deve ser usado apenas uma vez.

4. Tipos

Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd. oferece em 2 tipos de sufixo com AF-DPT e AF-DPT-S.

(Consulte a lista de modelos “Tabela 1” de Polyp Trap em anexo)

Tabela 1: Os modelos de Polyp Trap na lista

Nã o.	Nome do modelo	Especificaçã o do modelo
1	Coletor de pólipos (Modelo descartável, com quatro espaços recolhidos separados)	AF-DPT
2	Coletor de pólipos (Modelo descartável, com espaço total recolhido)	AF-DPT-S

Informações sobre as dimensões oferecidas podem ser obtidas no catálogo principal da *Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd.*

5. Descrição dos produtos

5.1 Estrutura dos Produtos

O coletor de pólipo é composto por tampa, corpo e tubo. Consulte a Figura 1.



Figura 1 a imagem do coletor de pólipo

5.2 Material dos Produtos

O coletor de pólipo é feito de PE (polietileno), PS (poliestireno) e PP (Polipropileno) consulte a Tabela 2.

Tabela 2 A lista de materiais da armadilha Polyp

Nã o.	Componentes do produto	Material	Materiais de contato corporal (Sim não)
1	A capa	Polietileno	Não
2	O corpo	Poliestireno	Não
3	O tubo	Polipropileno	Não

6. Cuidados

- a. Estrito somente por profissionais qualificados para uso deste dispositivo;
- b. Os coletores de pólipos não são esterilizados por fabricante;
- c. Os coletores de pólipos são de uso único e devem ser destruídos após o uso;
- d. Fique longe de umidade;
- e. Os coletores de Pólipos só podem ser usados em conjunto com um endoscópio;
- f. Estes instrumentos não se destinam a outras aplicações.

7. Funcionamento

7.1 Verifique antes usar

- a. Se na embalagem está incluído manual de uso, o certificado do produto e o produto;
- b. Se a embalagem está vedada;
- c. Abrir a bolsa unica, veja se o coletor de pólipo armadilhas está danificado. Se estiver danificado, por favor não use isto e contate Alton ou distribuidor local para troca imediata.

7.2 Operação

- a. Preste atenção à compatibilidade entre o coletor de pólipo e o endoscópio;
- b. Conecte firmemente o primeiro tubo graduado ao tubo de sucção (tudo de vácuo);
- c. Agora conecte firmemente o segundo tubo ao endoscópio (fornecimento conexão);
- d. Vire a tampa do coletor para o lugar da seta de marcação sobre a posição "O" para evitar a sucção do pólipo;
- e. Agora os pólipos podem ser sugados / coletados. Portanto, gire a tampa com cuidado e coloque a seta de marcação na posição 1, 2, 3, 4 . Colete apenas um pólipo por câmara;
- f. Após cada coleção gire a tampa até a marcação de seta e coloque sobre posição "Ó" ;
- g. Quando terminar e todos os pólipos forem coletados, remova o tubo conectado à sucção bombear do coletor de Pólipo. Então desconectar o outro tubo de

o coletor de Pólipo. Agora você pode remover os pólipos das câmaras e transferi -los para análise no laboratório;

8. Esterilização

- a. O coletor de pólipo não é esterilizado pela Alton em entrega;
- b. Não precisa ser esterilizado antes usar;
- c. Apenas para uso único se descartável modelos.

9. Período de Validade

Dez anos para armazenamento antes de abrir a embalagem.

10. Armazenar

- a. Não coloque objetos na embalagem do coletor de pólipo;
- b. Não armazene o coletor de pólipo perto de produtos químicos agressivos;
- c. Não expor o coletor de Pólipo direto ou indireto à luz solar ou outro raio ultravioleta;
- d. Temperatura de armazenamento: 0-40 ° C;
- e. Umidade de armazenamento: 30-85%;

11. Do utilizador

O usuário deste produto deve ser especializado na área de endoscopia. Deve ter formação especial no manuseamento e reprocessamento de produtos para endoscopia flexível.

12. Reparo e Reclamações

Todos os instrumentos não são permitidos:

- a. No interesse da saúde dos nossos colaboradores apenas instrumentos desinfetados ou esterilizados podem retornar. Esses devem ser rotulados como tal, de outra forma o manuseio não é possível;
- b. Para ser reparado para uso único.

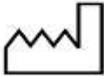
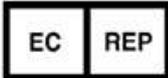
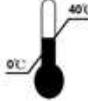
13. Fundação legal

Aplica-se a Lei da União Europeia.

14. produtos Apoiar

Em caso de questões ou dificuldades relativo nosso instrumentos por favor contato o distribuidores locais ou **Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd.** diretamente durante o trabalho regular horas.

15. Símbolos Lista

NO.	Description	Symbols on labels
1	CATALOGUE NUMBER	
2	MANUFACTURER	
3	DATE OF MANUFACTURE	
4	USE BY	
5	BATCH CODE	
6	NON-STERILE (sold in non-sterile conditions)	
7	DO NOT REUSE	
8	AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY	
9	Notified body number	
10	KEEP DRY	
11	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT	
12	TEMPERATURE LIMITATION	
13	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED	
14	CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	